


# FRAMI-AVD

## CASQUE DE TEST D'ACUITÉ VISUELLE DYNAMIQUE

Évaluez et réeduquez la capacité à stabiliser l'image sur la rétine lors des mouvements de tête.

- Évaluation du RVO via la fonction visuelle
- Outil d'aide au diagnostic et rééducation
- Relation directe aux plaintes d'oscillopsies
- Adapté aux enfants

L'acuité visuelle dynamique Framiral quantifie la différence entre l'acuité visuelle lorsque la tête est immobile et lorsqu'elle est en mouvement. Ce dispositif permet l'évaluation de la capacité à stabiliser l'image d'une cible fixe qui se projette sur la rétine lorsque la tête bouge. Cette mesure est donc très physiologique puisque, dans nos activités journalières, nous sollicitons régulièrement notre vision sans pour autant avoir une tête rigoureusement immobile. Le système Frami-AVD reflète l'efficacité du RVO, dans les plans physiologiques globaux (latéral, horizontal, vertical) et/ou les plans plus précis des canaux.

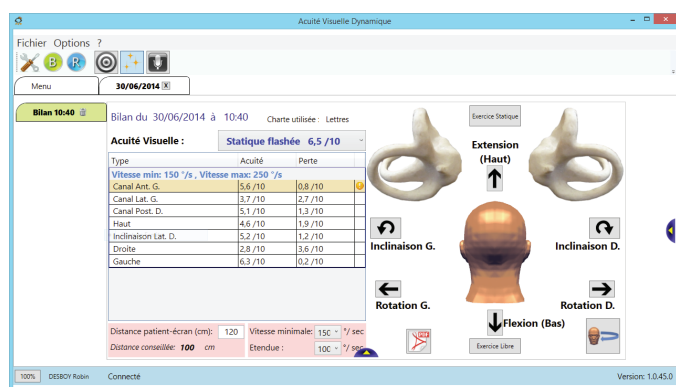

Logiciel du FRAMI-AVD



FRAMI-AVD

# FRAMI-AVD

## CASQUE DE TEST D'ACUITÉ VISUELLE DYNAMIQUE

### FICHE TECHNIQUE

- Décliné en 2 versions :
  - Frami-AVD version Sans Fil
  - Frami-AVD version Filaire
- Module capteur de position Sans Fil compatible équipement Frami-VCOR
- Autonomie 4 à 6h (version sans fil)
- Durée de charge 4h (version sans fil)
- Poids 150g (version sans fil) – 250g (version filaire)
- Longueur du cordon 3m (version Filaire)
- Connectique USB (1 port)
- Casque serre-tête réglable livré avec 5 protections frontales
- 4 chartes visuelles validées pour examen, 17 pour rééducation
- Plage de vitesse paramétrable
- Logiciel compatible Windows

### OPTIONS

- Supplément de 5 protections frontales



Tous nos produits sont garantis 2 ans. Une assistance gratuite, de qualité, basée en France, est à votre disposition de 9h à 18h du lundi au vendredi pour répondre à vos questions par téléphone. Une formation technique dans nos locaux vous est offerte pour l'achat de matériel. Framiral accepte le règlement par organisme de financement.

+33 (0) 422 480 107 - [contact@framiral.fr](mailto:contact@framiral.fr) - [www.framiral.fr](http://www.framiral.fr)